


Double Cover System

顱骨圓形接骨板・釘系統



衛部醫器製字
第004669號

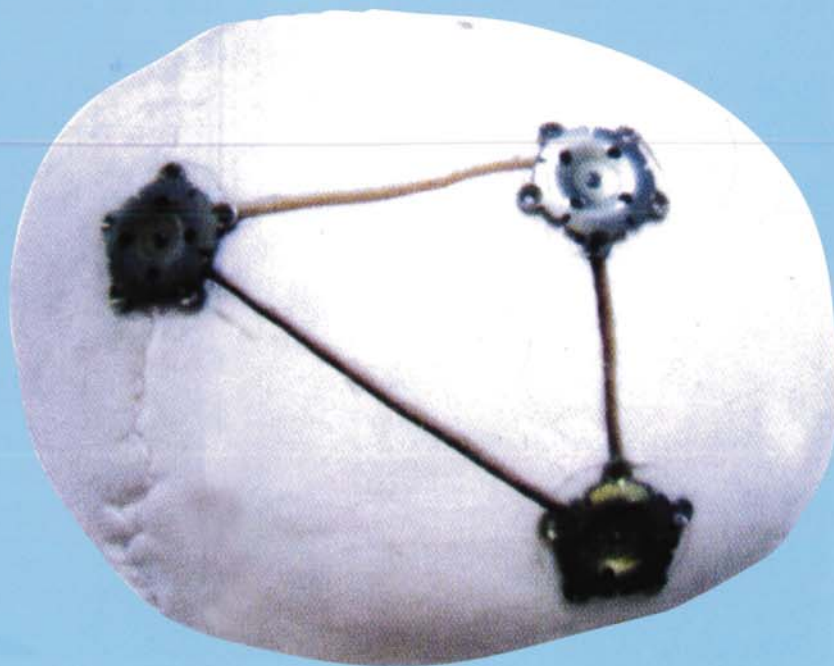

亞太醫療器材科技股份有限公司

彰化縣伸港鄉全興工業區工三路2號

電話：(04)798-7099

傳真：(04)798-7077

台北辦事處：

台北市大安區忠孝東路三段96號3樓

電話：(02)2778-7396

傳真：(02)2778-6079

SYNTEC SCIENTIFIC CORPORATION

2, Kung San Road, Chuan Shing Industrial Zone,
Shen Kang, Chang Hua, Taiwan.

Tel.: 886-4-798-7099 Fax: 886-4-798-7077

TAIPEI OFFICE:

3Fl, No.96, Sec.3, Chung Hsiao East Road,
Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2778-7396 Fax: 886-2-2778-6079



顱骨鎖



編 號	直 徑
DC-10	10mm


編 號	直 徑
DC-14	14mm
DC-20	20mm

顱骨鎖特點

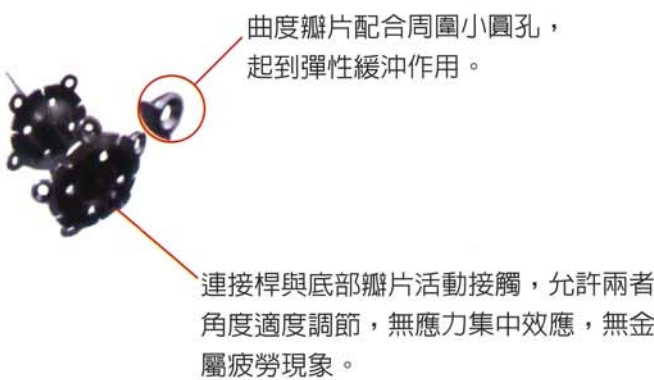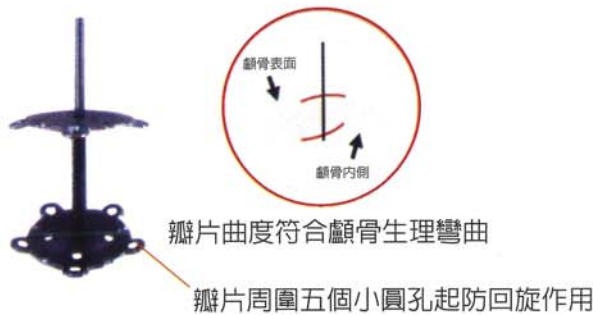

→ 連接桿與底部瓣片活動接觸，允許兩者角度適度調節。
該設計無應力集中效應，無金屬疲勞現象，防止連接桿斷裂。

操作示意圖

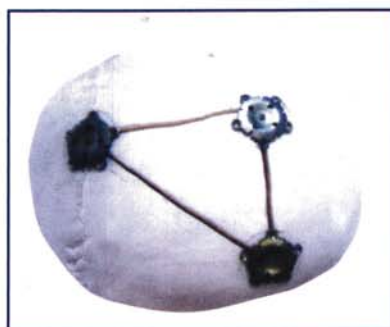

→ 操作要點

使用時應還原顱骨骨瓣，先順時針旋轉上瓣片至接觸顱骨，再用手按住上瓣片使其固定，逆時針旋轉中心連接桿，至上下瓣片夾緊骨瓣，用姆指緊按上瓣片絲桿根部推斷絲桿。

DC-100

盒子

Box





Quality Assurance System Certified

- USA/FDA 510K Certified
- CE MARK/MDD Certified
- GMP Certified
- ISO 9001, 13485 Certified



SYNTEC SCIENTIFIC CORPORATION

FACTORY :

2, Kung San Road, Chuan Shing Industrial Zone,
Shen Kang, Chang Hua, Taiwan.

Tel : 886-4-798-7099 Fax : 886-4-798-7077

TAIPEI OFFICE:

3Fl., No.96, Sec.3, Chung Hsiao East Road,
Taipei, Taiwan.

Tel : 886-2-2778-7396, Fax : 886-2-2778-6079